

## Informationen für die Praxis

Die Harnleiterschleife Magnetic Black-Star® ist Ihrer Patientin/Ihrem Patienten in der Klinik für Urologie am Franziskus Krankenhaus eingelegt worden.

**Station** \_\_\_\_\_

**Tag der Einlage** \_\_\_\_\_

**Empfohlener Entnahmetag** \_\_\_\_\_

Für Ihre Rückfragen: **Tel 030 2638 6132**

Chefarzt und Stellv. Ärztlicher Direktor der Joseph Kliniken Berlin PD Dr med. Carsten Kempkensteffen  
**Tel 030 2638 3801 | Fax 030 2638 3803**  
**urologie@joseph-kliniken.de**

### Anfahrt



Impressum:  
 Joseph Kliniken Berlin | Franziskus Krankenhaus Berlin  
 Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité  
 Klinik für Urologie  
 Budapest Street 15-19 | 10787 Berlin



Information  
für Ärzt\*innen  
und  
Patient\*innen

## Klinik für Urologie

Magnetische Harnleiterschleife

## Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihre schnelle und komfortable Genesung hat für uns höchste Priorität. Deshalb wurde Ihnen im Rahmen des Eingriffs eine innovative Harnleiterschiene eingelegt. Diese muss, im Gegensatz zu herkömmlichen Schienen, nicht durch eine Blasenspiegelung extrahiert werden. Stattdessen wird die Schiene schmerzlos mit einem magnetischen Entfernungskatheter entfernt.

Wir bitten Sie, Ihrer behandelnden Fachärztin/Ihrem Facharzt zum nächsten Termin dieses Informationsschreiben und den steril verpackten Entfernungskatheter (bitte nicht knicken) auszuhändigen, damit die Harnleiterschiene schnell und schmerzfrei entfernt werden kann.

Bei Fragen und Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.


Gute Besserung wünscht Ihnen  
**Ihr Team der Klinik für Urologie**

## Liebes Praxis-Team,

am blasenseitigen Ende der Harnleiterschiene Ihrer Patientin/Ihres Patienten befindet sich ein biokompatibler fadenverankerter Magnet. Der Entfernungskatheter im Tiemann-Design baut ein magnetisches Kraftfeld und damit eine stabile Verbindung auf, wodurch sich die Schiene in der Regel ohne Zystoskopie problemlos entfernen lässt.

## Entfernen der Harnleiterschiene

Für den Eingriff sollte die Blase der Patientin/des Patienten nur wenig gefüllt sein. Bitte bereiten Sie das Entfernen der Harnleiterschiene vor, indem Sie die äußere Harnröhrenmündung desinfizieren und ein lokalanästhesierendes Gleitgel instillieren.

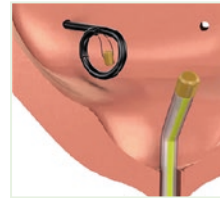

1. Der Entfernungskatheter wird über die Harnröhre bis zur Blase eingeführt und in einer 360°-Bewegung rotiert.



2. Durch die Rotation finden sich die Magneten und verbinden sich spürbar miteinander.



3. Die Harnleiterschiene wird mit einem langsamen, kontinuierlichen Zug entfernt. Das dauert in der Regel nicht länger als 30 Sekunden.



## Wir sind die Joseph Kliniken Berlin:

Das St. Joseph Krankenhaus und  
das Franziskus Krankenhaus –  
vereint unter einem neuen Namen.